


# EINE KLEINE LÖSUNG FÜR SOFORTIGE ERGEBNISSE

Navina™ Mini kann Ihre Darmprobleme lindern. Eine intuitive Lösung zur Unterstützung bei unvollständiger Entleerung und/oder Stuhlschmieren.

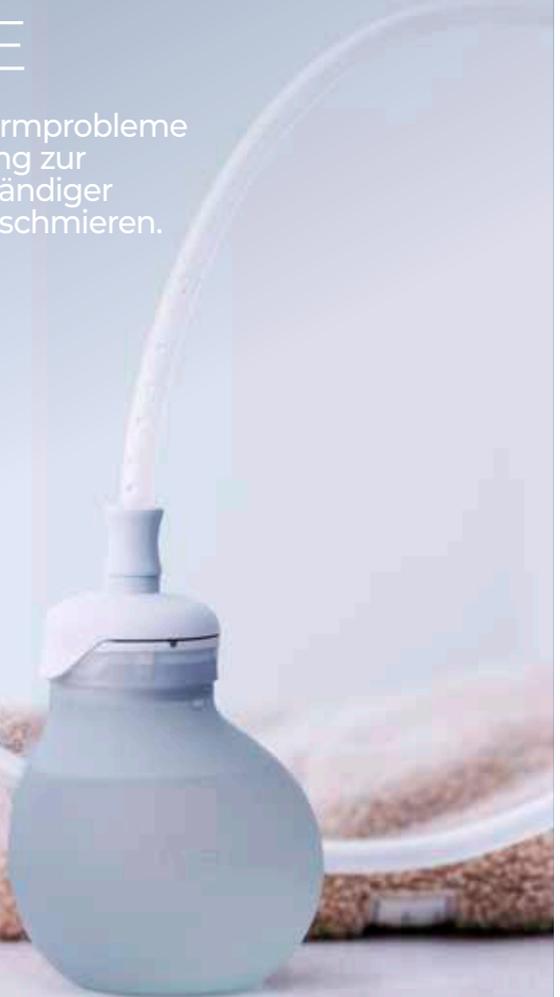

**Navina™** Mini

# NAVINA MINI KANN SIE BEFREIEN

Darmprobleme können einen erheblichen Einfluss auf Ihre Gesundheit und Lebensqualität haben. Sie verursachen Beschwerden und Scham, die dazu führen können, dass man aus Angst vor Unfällen soziale Situationen meidet.

Diese Probleme kommen häufiger vor, als man denkt, aber leider wird nur selten darüber gesprochen. Glücklicherweise gibt es Hilfsmittel, die Ihnen helfen können.

Eines davon ist Navina Mini – eine einfach zu bedienende Lösung, die Ihnen bei Ihren Beschwerden helfen kann:

- ✓ Haben Sie das Gefühl einer unvollständigen Entleerung?
- ✓ Haben Sie gelegentliches Stuhlschmierer?

## EINE KLEINE LÖSUNG FÜR SOFORTIGE ERGEBNISSE

Navina Mini ist eine diskrete und intuitive niedrigvolumige Lösung zur Irrigation, die bei Symptomen wie unvollständiger Entleerung oder Stuhlschmierer helfen kann. Mit einer sanften Wasserspülung reinigt es den unteren Teil des Rektums und verschafft so sofortige Erleichterung und verhindert Auslaufen.



# EIN CLEVERES DESIGN MACHT ES EINFACH

**Passend für Ihre Hand geformt**  
für den ergonomischen Gebrauch.

**Leicht drückbarer Wasserbehälter,**  
der 185 ml Wasser fasst.

**Abgerundete Spitze**  
für ein angenehmes Einführen.

**Hygienisch**  
für eine komfortable Nutzung

**Verlängerungsschlauch**  
kann für zusätzliche  
Reichweite angeschlossen  
werden.




## Langlebiges Design

Der Wasserbehälter und der optionale Verlängerungsschlauch können bis zu 60 Mal verwendet werden.

Der Rektalkonus ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt.


Navina Mini ist 100 % frei von Latex, PVC und Phthalaten.

## ANWENDUNG

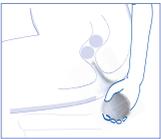

1

Setzen oder stellen Sie sich über die Toilette.  
Führen Sie den Konus in das Rektum ein.

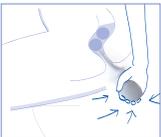

2

Spülen Sie vorsichtig durch  
Drücken des Wasserbehälters.



3

Bei Bedarf können Sie den  
Verlängerungsschlauch verwenden.

Eine vollständige  
Anleitung finden Sie in der  
Gebrauchsanleitung oder auf  
unserer Website.

## Navina Darmmanagement. Ein komplettes Sortiment an Produkten für das Darmmanagement.

Wir wissen, dass es beim Darmmanagement keine Standardlösung gibt. Daher sind wir stolz darauf, verschiedene Lösungen anbieten zu können, die den individuellen Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht werden – und das alles unter einer Marke, die unabhängig von der Produktwahl dieselbe Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität verspricht.

## Navina Mini

### Verwendungszweck

Navina Mini ist für die transanale Irrigation bestimmt, bei der ein geringes Wasservolumen durch einen Rektalkonus zum Einmalgebrauch in das Rektum instilliert wird.

### Indikationen

Navina Mini ist für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 3 Jahren indiziert, die an unvollständiger Stuhlentleerung und/oder Stuhlinkontinenz leiden.

### Kontraindikationen

- bekannte Anal- oder Kolorektalstenose
- aktive entzündliche Darmerkrankung
- akute Divertikulitis und divertikulärer Abszess
- kolorektaler Krebs
- ischämische Kolitis
- innerhalb von 3 Monaten nach einer analen oder kolorektalen Operation

Da die Liste der Kontraindikationen möglicherweise nicht vollständig ist, berücksichtigt das Pflegepersonal/ Fachpersonal auch stets individuelle Faktoren. Vor dem Gebrauch siehe Gebrauchsanleitung.



Hersteller:  
Wellspect HealthCare,  
Aminogatan 1, P.O. Box 14,  
SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00.  
www.wellspect.com



Artikelnummer	Produkt	Inhalt
6931000	Navina Mini Start Set	1 Wasserbehälter, 5 Konen, 1 Verlängerungsschlauch
6930700	Navina Mini Set	1 Wasserbehälter, 30 Konen
6930800	Navina Mini Extension Set	1 Wasserbehälter, 30 Konen, 1 Verlängerungsschlauch
6930900	Navina Mini Refill Set	30 Konen

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren, und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

### Wellspect. A Real Difference.

Für weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie unsere Website. Folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

[wellspect.de](https://www.wellspect.de)

[wellspect.ch](https://www.wellspect.ch)

[wellspect.at](https://www.wellspect.at)



Wellspect GmbH, An der kleinen Seite 8, 65604 Elz, Deutschland. Telefon: +49 6431 9869-0

Wellspect AG, Täferweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz. Telefon: +41 800 620 240

Wellspect HealthCare GmbH, Wienerbergstrasse 11 Turm A/21, 1100 Wien, Telefon: +43 1214 6150-0